
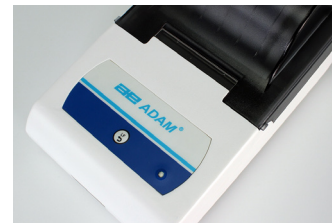


Durable y versátil, la AIP es una impresora compacta de matriz de puntos de alta velocidad. La construcción de plástico ABS es sólida y fácil de usar, ya que funciona con solo un interruptor de encendido/apagado y un botón para la alimentación de papel. La impresora se puede conectar a cualquier dispositivo que tenga una interfaz RS-232 o USB, y detecta automáticamente la configuración de una báscula para una comunicación rápida. Alimentado con un adaptador o una batería recargable, la impresora AIP es fácil de transportar y funciona incluso cuando la electricidad no está disponible. El software de configuración incluido con la impresora es compatible con los sistemas operativos Windows, incluidos Windows XP, Windows 7, Windows 8 y Windows 10. La impresora utiliza papel de 57 mm x 50 mm y soporta varios idiomas.

Operación simple, conectividad rápida y capacidad de múltiples idiomas

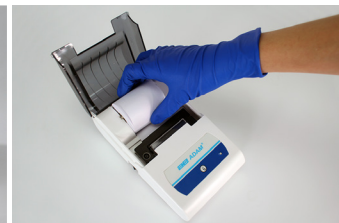

Características

- Adaptador de CA incluido
- Batería recargable incluida para operar casi en cualquier lugar
- Método de la impresora: matriz de punto de impacto de 8 pines
- Se suministra con una interfaz RS-232 y un puerto USB que permite la conexión entre la impresora, la computadora y el dispositivo de pesaje para actualizar el firmware y configurar los parámetros.
- Detección de configuración automática: los parámetros de comunicación pueden identificarse automáticamente y configurarse para una configuración rápida con dispositivos.
- Velocidad de impresión rápida de 1.7 líneas por segundo (aprox.)
- Dígitos de la impresora: 24 dígitos/línea o 40 dígitos/línea, matriz de puntos de 5 x 7
- Tamaño del papel de la impresora: 57 mm de ancho, 50 mm de diámetro

Sobre ADAM:

Con 50 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Accessories

Item number	Description
3126014659Papel para impresora AIP
3126014660Papel para impresora AIP (paquete de 10)
3126014661Cartucho de cinta de tinta

Suministrados por